


# DURAN® ANSCHLUSS-SYSTEM GL 45 MIT 1, 2 ODER 3 EDELSTAHL-STECKKOLIVEN

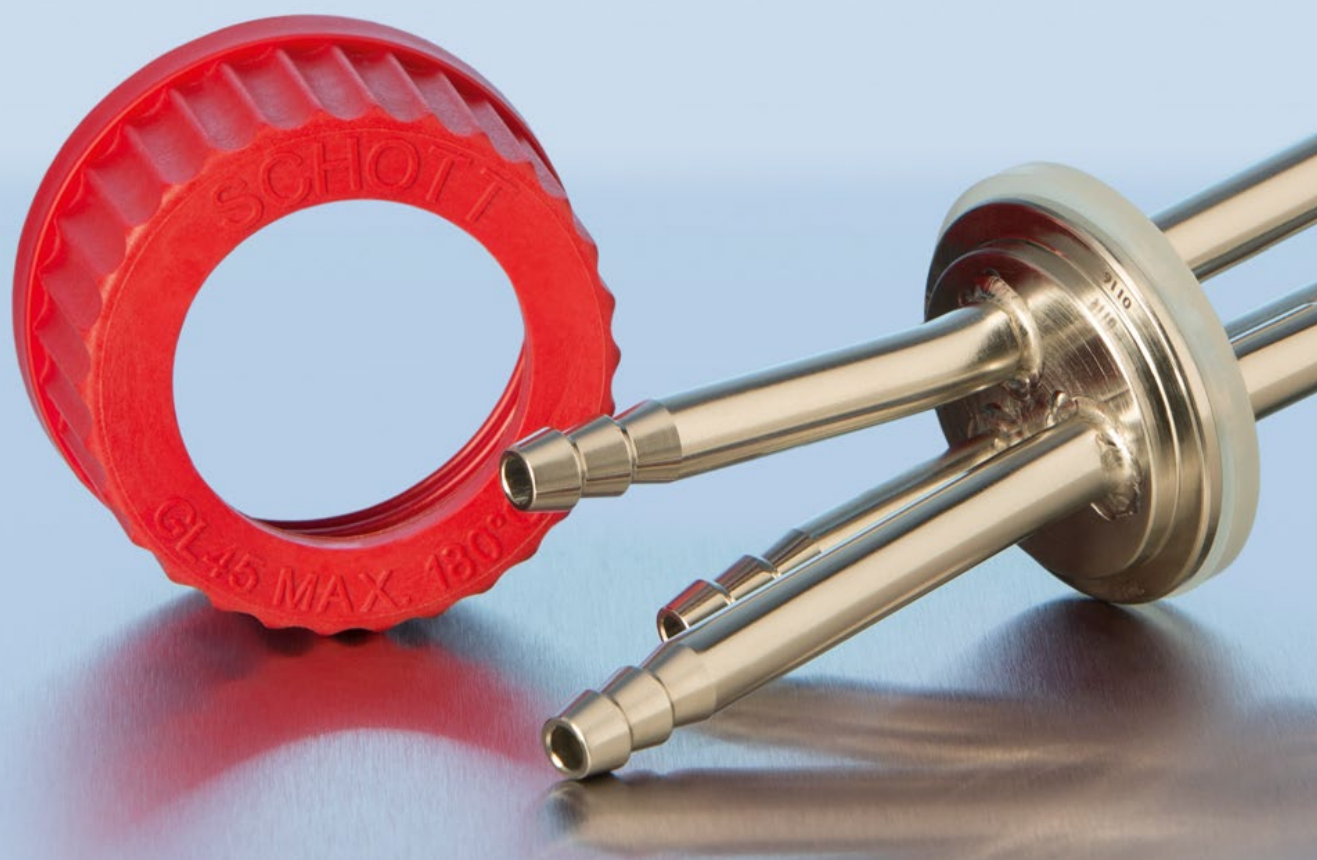

DURAN  
WHEATON  
KIMBLE

Excellence in your hands

HUBERLAB. AG  
Industriestrasse 123  
4147 Aesch

T 061 717 99 77  
F 061 711 93 42

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)  
[info@huberlab.ch](mailto:info@huberlab.ch)

**HUBERLAB.**

committed to science

# DURAN® ANSCHLUSS-SYSTEM GL 45 MIT 1, 2 ODER 3 EDELSTAHL-STECKKOLIVEN

Ein robustes und widerstandsfähiges Schlauchverbindungs-System für GL 45 Labor- und Medienflaschen in verschiedenen Größen. Der Flaschendeckeladapter vereinfacht den Transfer von Flüssigkeiten in geschlossenen und sterilen Systemen. Ideal für Laboratorien in den Bereichen Chemie, Biowissenschaften und Biopharmazie.

## Anwendungsbereiche

- Steriler Flüssigkeitstransfer zwischen Behältern
- Probenentnahme aus großen Behältern in Flaschen
- Behälterdeckel zum Anschluss an Laborinstrumente
- Anschluss für Spinnerflaschen und Zellkulturgefäße
- Autoklavierbare Medien in GL 45 DURAN® Flaschen



## Eigenschaften

- Das GL 45 Anschluss-System kann für DURAN® GL 45 Laborflaschen von 100 bis 20.000 ml verwendet werden.
- Die ein, zwei bzw. drei Steckkoliven an der Innen- und Außenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8,0 mm geeignet, z.B. Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche\*.
- Das Anschluss-System mit einer Steckolive eignet sich für autoklavierbare Medien in Verbindung mit einem sterilen Belüftungs-Kapselfilter.
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen.
- Die zwei bzw. drei oberen Steckkoliven sind abgeschrägt, um das Anbringen der Schläuche zu erleichtern.
- Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404 / S31603) gefertigt.
- Alle Teile sind vollständig geschweißt, um Einschüsse und Hohlräume zu verhindern.
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
- Die Silikondichtung (Platin katalysiert, USP <88> Class VI) und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss.
- Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vollständig nachverfolgbar durch Retrace Code

\*Sani-Tech® ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.

## Bestellinformation

	Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
NEU	DURAN® Anschluss-System GL 45 mit 1 Edelstahl-Steckolive	1	29 261 26 07
	DURAN® Anschluss-System GL 45 mit 2 Edelstahl-Steckoliven	1	29 261 27 01
	DURAN® Anschluss-System GL 45 mit 3 Edelstahl-Steckoliven	1	29 261 28 04

## Ersatzteile

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
DURAN® Silikondichtung (Außendurchmesser 40,5 mm / Innendurchmesser 27,5 mm), Stärke: 3 mm	10	29 223 28 05
DURAN® Schraubverschluss GL 45, rot, PBT mit Mittelöffnung von 34 mm	10	29 227 10 07

Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.

